

Intensiv Ortho-Strips System

Universität Zürich, Schweiz



Oszillierende Diamantstrips für die interdentale doppelseitige Zahnschmelzreduktion in der Kieferorthopädie (Stripping)

Bei der Öffnung des Interdentalraumes und der Reduktion, Finierung und Politur des Zahnschmelzes in der Kieferorthopädie sind Rillen und Kratzer zu vermeiden. Die Zahnschmelzreduktion wird schrittweise, unter Verwendung von grober bis feiner Körnung, durchgeführt. Mit dem Intensiv Ortho-Strips System ist gegenüber den manuellen Strips eine rasche kontrollierte Zahnschmelzreduktion mit anschliessender Politur ohne unnötige Entfernung von gesunder Zahnhartsubstanz möglich.

Produktbeschreibung

- Flexible Strips, beidseitig diamantiert.
- 6 verschiedene Körnungen: 08µm mit Säge zur Öffnung der interdentalen Kontaktpunkte, 80, 60, 40, 25 und 15µm Strips zur Zahnschmelzreduktion, Konturierung, Finierung und Politur.

Zu verwenden in Kombination mit Intensiv Swingle, WG-69 LT Ortho (mit Licht), Seiten 68-69

Indikationen

- Öffnung des Kontaktpunktes im Interdentalraum
- Vergrößerung der Interdentalräume in der Kieferorthopädie durch bilaterale Zahnschmelzreduktion
- Elimination von leichten Engständen, Finish der Behandlung in der Kieferorthopädie
- Approximale bilaterale Schmelzpolitur

Vorteile

- Effiziente Öffnung der interdentalen Kontaktpunkte
- Rasche und kontrollierte Reduktion* des Zahnschmelzes
- Approximale Konturierung, Finierung und Politur beider Nachbarzähne in einem Arbeitsschritt
- Keine Verletzungen für Patienten (Lippen) und Zahnärzte (Finger)



Sortiment
Ref. 060B

(* siehe auch:
Intensiv IPR-DistanceControl,
Seiten 72-73)

Intensiv Ortho-Strips One-Sided

Universität Zürich, Schweiz



Oszillierende Diamantstrips für die interdentale einseitige Zahnschmelzreduktion und approximale Politur in der Kieferorthopädie (Stripping)

Bei der Reduktion, Finierung und Politur des Zahnschmelzes in der Kieferorthopädie (Stripping) sind Rillen und Kratzer zu vermeiden. Die Zahnschmelzreduktion wird schrittweise, unter Verwendung von grober bis feiner Körnung, durchgeführt. Mit dem Intensiv Ortho-Strips One-Sided ist gegenüber den manuellen Strips eine rasche, kontrollierte Zahnschmelzreduktion mit anschliessender Politur ohne unnötige Entfernung von gesunder Zahnhartsubstanz und unter Schonung des Nachbarzahnes möglich.

Produktbeschreibung

- Flexible Strips, einseitig diamantiert.
- 6 verschiedene Körnungen: 08, 80, 60, 40, 25 und 15µm Feilen zur Zahnschmelzreduktion, Konturierung, Finierung und Politur.
- Variante links („L“) und rechts („R“) mesial und distal im Ober- und Unterkiefer.

Zu verwenden in Kombination mit Intensiv Swingle, WG-69 LT Ortho (mit Licht), Seiten 68-69

Indikationen

- Öffnung des Kontaktpunktes im Interdentalraum
- Vergrößerung der Interdentalräume in der Kieferorthopädie ohne iatrogene Schäden der Nachbarzähne
- Einseitige approximale Konturierung, Finierung und Politur


Vorteile

- Schonung der gesunden Zahnhartsubstanz der Nachbarzähne
- Rasche und kontrollierte Reduktion* des Zahnschmelzes
- Keine Verletzungen für Patienten (Lippen) und Zahnärzte (Finger)



Sortiment
Ref. 064

(* siehe auch:
Intensiv IPR-DistanceControl,
Seiten 72-73)

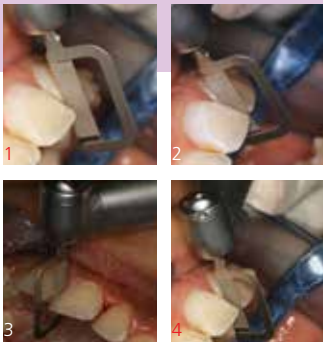


1) Öffnen des Interdentalraumes mit OS08OP 2) Konturieren mit OS40 3) Kontrolliertes Finieren mit OS25 4) Vorpulieren distal mit OS15

Klinische Abbildungen: Dr. Francesco Garino, Turin, Italien

		08	80	60	40	25	15
µm		OS08OP					
494	Orange		OS80C				
524	Blaue			OS60			
514	Braune				OS40		
514	Rote					OS25	
514	Weiß						OS15
504	Gelbe						
		Öffnen	Reduzieren	Konturieren	Konturieren	Finieren	Vorpolitur
		Beidseitig diamantiert					

Intensiv Ortho-Strips Set, Ref. 060B
Sortiment mit 4 oszillierenden Strips OS60, OS40, OS25, OS15

Alle Intensiv Ortho-Strips sind erhältlich in Packungen zu 1, 3 oder 6 Stück

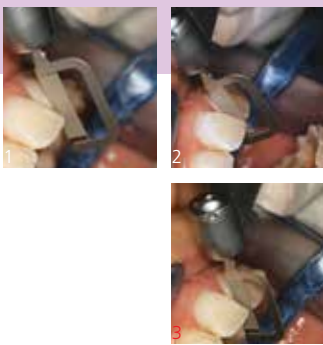

1-3) Konturieren eines Schneidezahnes mesial mit OS40L

Klinische Abbildungen: Dr. Francesco Garino, Turin, Italien

Intensiv Ortho-Strips One-Sided Set, Ref. 064
Sortiment mit 6 oszillierenden Strips OS40L, OS25L, OS15L, OS40R, OS25R, OS15R

Alle Intensiv Ortho-Strips One-Sided sind erhältlich in Packungen zu 1, 3 oder 6 Stück

		08	80	60	40	25	15
µm		OS08OP-R OS08OP-L					
494	Orange		OS80C-R OS80C-L				
524	Blaue			OS60R OS60L			
514	Braune				OS40R OS40L		
514	Rote					OS25R OS25L	
514	Weiß						OS15R OS15L
504	Gelbe						
		Öffnen	Reduzieren	Konturieren	Konturieren	Finieren	Vorpolitur
		Einseitig diamantiert, L = Links R = Rechts					